

PINNACLE SL300



Vous apporte la tranquillité d'esprit



DIFFÉRENT PAR SA CONCEPTION

Le monte-escalier Pinnacle a une réputation établie en tant que leader de l'industrie pour sa conception innovante, sa performance solide et sa fiabilité. Son système d'entraînement breveté est la pierre angulaire qui rend ce monte-escalier différent de tous les autres sur le marché.

- Sans lubrification, ce qui vous permet d'éviter de vous tâcher, de tâcher vos escaliers et même que vos animaux ne tâchent votre intérieur
- Le système à faible friction réduit le coût de possession : aucune maintenance n'est requise et les factures d'énergie sont réduites.
- Fonctionne sur batteries avec un moteur efficace résultant en une performance prolongée pendant la perte de puissance
- La vis sans fin surdimensionnée offre une plus grande stabilité
- La conception symétrique offre la largeur pliée la plus compacte de l'industrie

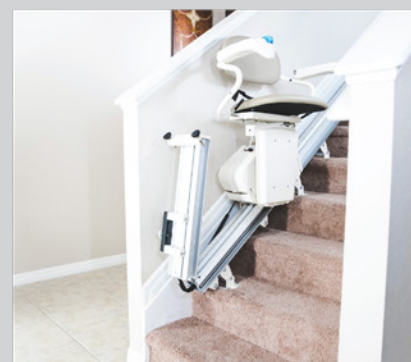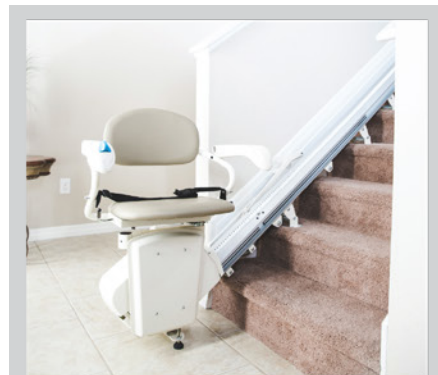

PASSAGES DÉGAGÉS

Le système de rail pliable automatique et mécanique exclusif d'Harmar élimine les obstacles et les risques de trébucher dans la zone basse d'arrivée. Son fonctionnement est automatique, l'utilisateur n'a pas besoin d'arrêter ou d'avoir quelqu'un d'autre pour l'assister. De plus, le fonctionnement étant mécanique, il n'y a pas non plus d'interrupteurs ou de contrôles supplémentaires.

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR VOUS

Monte-escalier Pinnacle SL300



L'interrupteur de contrôle ergonomique aide ceux d'entre vous souffrant d'arthrose ou ayant une dextérité manuelle limitée.



Le repose-pied surdimensionné offre plus de confort et de sécurité



La crémaillère en nylon polymère avec entraînement par vis hélicoïdale sans fin possède 6 points de contact pour une stabilité optimale



Mon Pinnacle me permet de monter et descendre les escaliers en toute sécurité. Il fonctionne si bien et est très silencieux. Je me sens maintenant mieux dans ma propre maison et moins dépendant des autres. Mes enfants ont l'esprit tranquille en me sachant en sécurité avec mon Pinnacle.

40+

Cycles pendant la perte de puissance

136

Kilos de capacité

ZÉRO

Maintenance requise

28 cm

Largeur pliée au mur

Caractéristiques techniques du produit SL300

Capacité	300 livres (136 kg)
Vitesse	20 pieds/min (6 m/min)
Largeur pliée	11 po. (28 cm)
Système d'entraînement	Crémaillère en nylon polymère avec vis sans fin hélicoïdale
Puissance	24 V CC (Batterie), le chargeur se branche sur une prise secteur standard
Longueur du rail	16 pieds (4,9 m) - 0 en standard
Dispositif de sécurité	Capteurs d'obstruction, verrouillage pivotant de siège de 90°, ceinture de sécurité
Garantie	2 ans pour les pièces, 10 ans pour la crémaillère/vis sans fin, 1 an pour les batteries
Options	Ceinture de sécurité rétractable, verrouillage à clé, rail supplémentaire

Caractéristiques techniques du produit SL300FR

Rail pliant	Mouvement automatique, mécanique et continu
Largeur pliée	13 po. (33 cm)

COMPACT

Le châssis du Pinnacle SL300 se replie parfaitement, occupant une largeur de seulement 11 po. (28 cm) sur votre mur d'escalier, permettant aux autres de passer. Afin de minimiser son empreinte, le rail ne fait que 3 po. (7,6 cm) de hauteur et son espacement avec le mur est seulement de 1 po. (2,5 cm).

